

TENSMED S82

MALÁ VEĽKOSŤ, SKVELÁ VÝKONNOSŤ!



TENSMED S82 je dokonalou voľbou pre profesionálne ošetrovanie svalovej stimulácie a úľavu od bolesti.

S týmto prístrojom môžete liečiť chronickú bolesť, pacientov zotavujúcich sa z traumatických stavov, imobilizáciu a zlepšiť držanie tela a stabilizáciu kolenného kĺbu pomocou TENS (transkutánna elektrická stimulácia nervov).

Liečba TENS je bezpečná, nemá žiadne vedľajšie účinky a môže byť vynikajúcou alternatívou k liečbe bolesti.

TENSMED S82 je 2-kanálový elektrostimulátor s jasne čitateľnou LCD obrazovkou.

65 PROGRAMOV

- 12 Šport
- 8 Fitness, Krása & Welnes
- 16 Bolesť (TENS)
- 9 Prevencia
- 11 Rehabilitácia
- 3 Inkontinencia
- 6 Voľné programy



ŠPECIÁLNE VLASTNOSTI

PROGRAMOVATEĽNÝ	6 voľných pozícií pamäte na vytvorenie prispôbených programov
PREDNASTAVENÉ PROGRAMY	59 konkrétnych programov funkčnej rehabilitácie a bolesti
RÝCHLE MENU	rýchlejšia navigácia
SYNCRO-STIM	zvýšiť intenzitu 2 kanálov súčasne iba pomocou jedného tlačidla.
DISPLEJ	jasne čitateľný LCD displej prispieva k optimálnej použiteľnosti a ľahkej obsluhu
BATÉRIA	

65 programy

12 Šport

8 Fitness, Krása & Wellness

16 Bolesť (TENS)

9 Prevencia

11 Rehabilitácia

3 Inkontinencia

6 Voľné programy

REHABILITÁCIA: Programy svalovej stimulácie sú zvlášť určené na funkčné zotavenie po chirurgických zákrokoch a po dobe imobilizácie. Zahrnuté programy pre posilnenie m. Vastus Medialis a zotavenie po chirurgickom zákroku ACL, Preventívne programy (predchádzanie traumám a úrazom), Re-atletizácia a Hemiplegia.


BOLEŠŤ: eliminujte bolesť špeciálnymi impulzmi prúdov TENS, ktoré mäkkou stimuláciou vášho tela umožňujú zotavenie vášho zdravia, wellness a zrekonštruovaného životného pôžitku. Výber zahŕňa programy pre akútnu a chronickú bolesť, bolesť krčka maternice, Lumbago, periartritída, epikondylitída, ischias a poranenia mäkkých tkanív.

INKONTINENCIA: špecifické programy na liečbu urologických porúch, ako je stres, nutkanie a zmiešaná inkontinencia.

ŠPORT: tTENSMED S82 je naprogramovaný tak, aby selektívne stimuloval rýchle a pomalé vlákna k trénovaniu rôznych svalových vlastností. Zahŕňa programy na zahriatie, maximálnu silu, vytrvalostnú silu, výbušnú silu, de-kontrahovanie (uvoľnenie svalstva), kapilarizáciu a aktívne zotavenie po súťaži / tréningu.

FITNESS, KRÁSA & WELLNESS: krása tela je prejavom stavu zdravia a tvorenia rovnováhy, ktorú si musíme vážiť a brániť pred útokmi času a sedavého života. S TENSMED S82 sa môžete starať o svoje telo a brániť jeho vitalitu a krásu pomocou elektrostimulačných skrášľovacích procedúr. Ideálne na drenáž, lipolýzu, vaskularizáciu, spevnenie, tonizáciu, tvarovanie a iné.

PREVENCIA: programy na posilnenie hlavných kĺbov (ako sú plece, kolená a bedrá) a na prevenciu pred traumami a zraneniami.

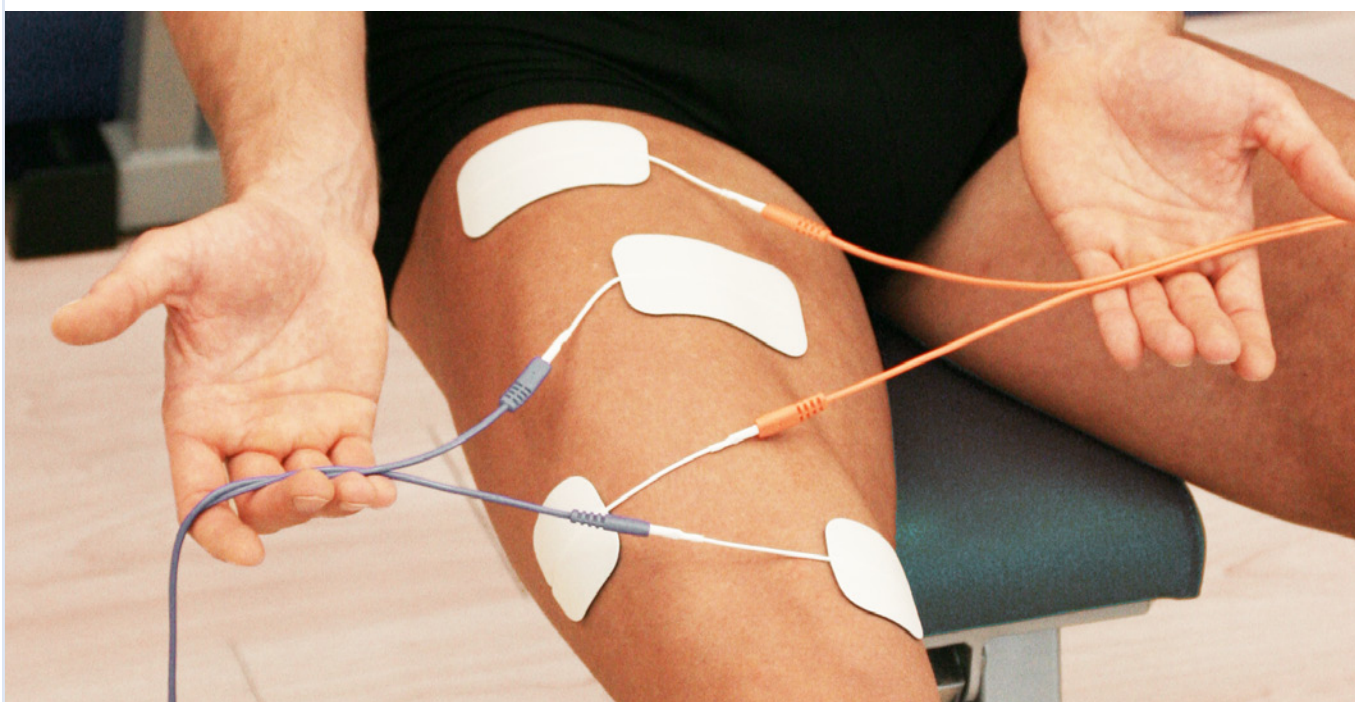

TENSMED S82



PARTNER FOR LIFE

1727901 TENSMED S82



EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č. 4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907 - 908, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Počet kanálov:	2 nesamostatné kanály
Intenzita:	0-100 mA / kanál
Forma vlny:	symetrický dvojfázový impulz 100% kompenzované
Konštantný prúd:	až do odporu 1 000 ohmov 1 -
Frekvencia:	150 Hz
Pulzná šírka (jednofázová):	50-400 us
Celková šírka impulzu:	100-800 us
Počet prednastavených programov:	59
Počet osobných programov:	
Stimulačné formy:	Konvenčné / nepretržité Výbuch Frekvenčná modulácia Pulzná šírková modulácia Prerušovaný
Časovač:	max. 100 min
Napájanie:	Sieť alebo batéria
Batéria:	Nabíjateľná batéria (NI-MH / 800 mAh / 4,8 V)
Napájačka:	Vstup: 10 0 - 240 V str., 50 - 60 Hz, 0,32 max. Výstup: 6,5V --- 200mA
Rozmery:	130x80x20 mm
Váha:	220 g
Displej:	
Trieda zariadenia:	II A
V súlade so smernicou 93/42/CEE-2007/47/CEE	

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Prenosná taška
- 2 Káble na pripojenie elektródy
- 4 samolepiace štvorcové elektródy (50x50mm) 4
- 4 samolepiace obdĺžnikové elektródy (50 x 90 mm)
- Nabíjačka
- Používateľská príručka

TENSMED S82

ENRAF-NONIUS



ENRAF-NONIUS B.V.

Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
The Netherlands
T.: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

PRÍSLUŠENSTVO TENS MED S82



ELEKTRODY A VĽHČENÉ PODLOŽKY

LEPIACE ELEKTRODY


- 3444222 EN-Trode Ø 2,2 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 8 ks (tiež for EMG)
- 3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks
- 3444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks
- 3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks
- 3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm konektor, 10 hárkov po 4 ks



3444222



3444056

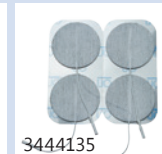

3444135



3444057



3444058

GUMOVÉ ELEKTRODY

- 3444128 Gumové elektródy 4x6 cm, 2 mm konektor, set 2 ks
- 3444129 Gumové elektródy 6x8 cm, 2 mm konektor, set 2 ks
- 3444130 Gumové elektródy 8x12 cm, 2 mm konektor, set 2 ks
- 3444380 Silikónové elektródy 5x5 cm TENS, 2 mm female




3444128



3444129



3444130

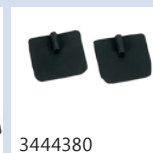

3444380

VĽHKÉ PODLOŽKY NA GUMOVÉ ELEKTRODY

- 1460273 Vlhké podložky pre gumové elektródy 4x6 cm, set 4 ks
- 1460266 Vlhké podložky pre gumové elektródy 6x8 cm, set 4 ks
- 1460275 Vlhké podložky pre gumové elektródy 8x12 cm, set 4 ks



1460273



1460266



1460275

BODOVÁ ELEKTRODA

- 3444180 Bodová elektróda (model s perom), 5 mm Ø, 2 mm konektor, vrátane 10 vodivých gumových krytiiek



3444180

PATIECIENSKY KÁBEL A ADAPTÉR

ADAPTÉRY

- 2523524 Konektor adaptéra, 2 mm, 4 mm, červená
- 2523523 Konektor adaptéra, 2 mm, 4 mm, čierny



2523524



2523523

EGAMED, spol. s r.o.

922 31 Ratnovce č. 4 - Slovakia

Tel.: +421 33 77 44 907 - 908, Fax: +421 33 77 44 911

E-mail: egamed@egamed.sk, www.egamed.sk

