



prisma APP

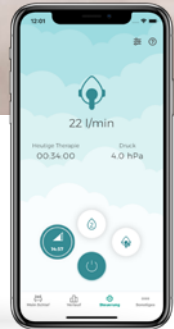

Aplikace pro propojení Vašeho zařízení s telefonem.

Sledujte průběžně postupné zlepšování Vašeho spánku.

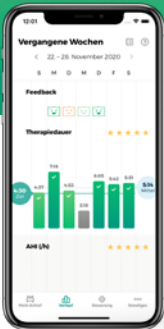

Sledujte kvalitu Vaší terapie a také, jak se Váš spánek postupně zlepšuje.

Mějte možnost vidět detailní informace o Vaší terapii.

Stanovte si vlastní cíle, kterých byste chtěli dosáhnout v rámci Vašeho spánku.

Ovládejte Vaše zařízení pomocí chytrého telefonu.



Možnosti použití aplikace prisma APP

SLEDOVÁNÍ VLASTNÍHO POKROKU:

- denní přehled
- přehled z posledního týdne
- kompletní přehled za celé období

OVLÁDÁNÍ PŘÍSTROJE:

- start/stop terapie
- ovládání zvlhčovače
- nastavení náběhové rampy
- test těsnosti masky
- případně nastavení dalších komfortních funkcí

NÁHLED NA KVALITU TERAPIE

- počet výpadků dýchání
- odhadovaná doba používání
- detekce hlubokého spánku
- těsnost masky

STANOVENÍ VLASTNÍCH CÍLŮ

Možnost stanovení vlastních cílů, kterých byste chtěli v rámci terapie dosáhnout.

TECHNICKÁ PODPORA

V případě technických potíží, aplikace obsahuje tipy a rady, jak si s těmito problémy poradit. Případně umožňuje odeslat zprávu pracovníkovi technické podpory.

GENEROVÁNÍ ZPRÁVY O TERAPII

Možnost generování zprávy obsahující informace o Vaší terapii, kterou je možno odeslat Vašemu lékaři nebo pečovateli.

Veškerá data o Vaší terapii a Vašich osobních údajích jsou zabezpečena.


Návod na připojení zařízení k telefonu

1. Aktivujte si Bluetooth na Vašem zařízení. Jakmile bude Bluetooth aktivní, na Vašem zařízení se objeví tato ikonka. ✖

V případě černého zařízení stačí pouze připojit externí modem.



Zařízení s dotykovým displejem

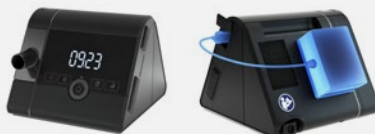

Zařízení bez dotykového displeje

V případě bílého zařízení bývá Bluetooth standartně již aktivované. Měli byste tedy vidět na displeji vpravo nahoře ikonku ✖. Pokud ikonku nevidíte, postup pro aktivaci Bluetooth je následující:



1. Zmáčkněte **Menu** tlačítko



2. Zmáčkněte tlačítko **+**, abyste se dostali do Nastavení



3. Mačkejte tlačítko **Rampa** dokud se na displeji neobjeví nápis **BLUE**



4. Zmáčknutím tlačítka **+** zapnete Bluetooth (na displeji se objeví ON)



5. Zmáčknutím tlačítka **Rampa** svou volbu potvrdíte



6. Stisknutím tlačítka **START** se vrátíte do hlavní nabídky

2. Stáhněte si aplikaci **prisma APP** do svého mobilu. Aplikaci naleznete jak v App Store, tak v Google Play.



3. Zapněte na Vašem telefonu Wifi, Bluetooth a Polohu a otevřete aplikaci **prisma APP**.

4. V případě, že spouštíte aplikaci **prisma APP** poprvé, klikněte na **Spárovat nový terapeutický přístroj**.



5. Následně vyberte z nabídky **Vaše zařízení**.



V případě černého zařízení

V případě černého zařízení stačí do aplikace zadat sériové číslo, které naleznete na boku přístroje



V případě bílého zařízení

1. V případě bílého přístroje nejprve zmáčkněte na 5 s tlačítko Menu, dokud se na displeji neobjeví animace pro párování přístroje



2. Poté stačí kliknout v aplikaci na **Spustit vyhledávání**



3. Následně stačí jenom v aplikaci **potvrdit spárování** a také na přístroji stisknout tlačítko **Rampa**



6. Poté se Váš přístroj a telefon vždy spolu propojí automaticky. Stačí mít jen vždy zapnuté Bluetooth a Wifi.

7. Následně Vám aplikace nabídne vytvoření účtu. Aplikaci je možné používat i bez vytvoření účtu, ale pro správné fungování aplikace tuto možnost doporučujeme.



V případě jakýchkoli technických problémů neváhejte kontaktovat naši technickou podporu!

kardioline@kardioline.cz
+420 541 214 456
+420 606 755 605

Kardio-Line spol. s r. o.
Antonínská 552/5, 602 00 Brno
www.kardioline.cz